



“POINTCARE M4”

Altezza	17,5 cm
Larghezza	21 cm
Profondità	12,5 mm
Peso	2,2 kg

Caratteristiche tecniche

Spettrofotometro per analisi sangue capillare. Manutenzione minima.

Schermo Touch Screen e Barcode reader incorporato nel copro della macchina. Scansionando il QR Code sulla busta in alluminio l'analizzatore riceve l'informazione sull'analisi da eseguire.

Può essere collegato a una stampante esterna. I risultati possono essere archiviati e trasmessi a un computer, memory stick o sistemi informativi di laboratorio/sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Capacità di memoria fino a 50.000 risultati di controllo paziente e di qualità.

Fornisce determinazioni quantitative in vitro di analiti di chimica clinica nel sangue intero, plasma o siero. L'analisi richiede 0,1 cc (100µl) di campione e il diluente nel disco reagente. Risultati da 10 a 13 minuti.

Analisi per dischetto

Dischetto GC1

- | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| • Glucosio | • Asparato Transaminasi | • Proteine Totali | • Trigliceridi |
| • Creatinina | • Bilirubina | • Albumina | • Colesterolo |
| • Azotemia | • Bilirubina Diretta | • Rapporto fra Albumina e Globuline | • Lipoproteine ad alta Densità (HDL-C) |
| • Acido Urico | • Bilirubina Indiretta | • Transaminasi | • Lipoproteine ad alta Densità (LDL-C) |

Dischetto Glucosio e Pannello Lipidico

- | | |
|--|--|
| • Trigliceridi | • Lipoproteine ad alta intensità (LDL-C) |
| • Colesterolo | • Glucosio |
| • Lipoproteine ad alta intensità (HDL-C) | • Fruttosamina |




Passaggio 1



Aggiungere il campione
al disco reagenti.

Passaggio 2

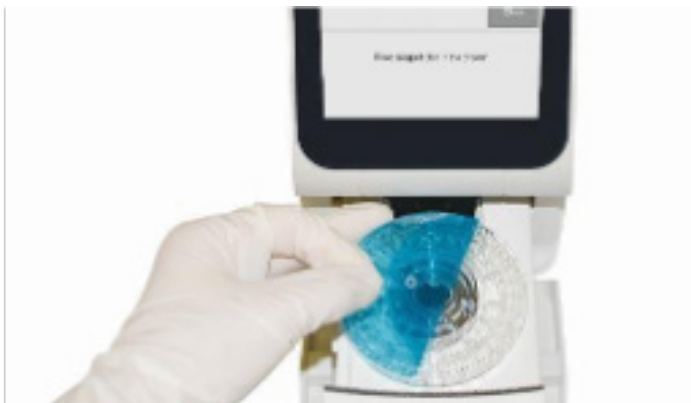

Inserire il disco nell'analizzatore.
Calibrazione automatica ad ogni test.

Passaggio 3



Leggere i risultati
Stampare via computer o
stampante collegata.